

< relaxmyway



QUATTROMED III

Limited Edition



< relax in style

С момента основания в 2000 году марка CASADA обозначает высококачественную продукцию в сфере велнеса и фитнеса.

Сегодня приборы CASADA используются в 37 странах мира. Постоянное усовершенствование, неповторимый дизайн и четкая направленность на повышение уровня жизни, а также надежность и превосходное качество являются отличительными чертами продукции компании «КАСАДА».

Поздравляем

Покупая данный массажер Вы проявляете заботу о своем здоровье.

Чтобы Вы могли в течение долгого времени пользоваться преимуществами данного прибора, мы рекомендуем внимательно прочитать инструкции по технике безопасности и соблюдать их при эксплуатации массажера.

Наслаждайтесь массажем при помощи персонального прибора Quattromed III Limited Edition.

Оглавление

28	Правила техники безопасности
28	Ввод в эксплуатацию
29	Технические характеристики
29	Комплектация и функции
30	Специальные функции
32	Дистанционное управление
32	Технические характеристики
33	Хранение и уход
33	Декларация соответствия требованиям ЕС
33	Гарантийные условия

Правила техники безопасности



До начала эксплуатации данного массажера, внимательно прочтите следующие инструкции, чтобы обеспечить безупречную работу и оптимальный эффект воздействия. Сохраняйте инструкцию по эксплуатации!

- Данный массажер соответствует общепризнанным техническим принципам и действующим нормам техники безопасности.
- Данный прибор не требует технического обслуживания. Необходимый ремонт должен выполняться только компетентным специалистом. Ненадлежащее использование или несанкционированный ремонт запрещены по причинам безопасности и ведут к аннулированию гарантийных обязательств.
- Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.
- Избегайте контакта массажера с водой, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Если массажер не будет использоваться в течение длительного периода, отключите его от сети питания во избежание опасности короткого замыкания.
- Не используйте поврежденные штепсельные вилки, кабель или расшатанные патроны. Если штепсельная вилка или кабель повреждены, производитель, представители сервисной службы или квалифицированные специалисты должны их заменить; в случае неисправности немедленно отключите прибор от сети питания. Мы не несем ответственности за вред, причиненный вследствие неправильного использования прибора или использования его не по назначению.
- Во избежание чрезмерной нагрузки на мышцы и нервные окончания не следует превышать рекомендованную продолжительность сеанса массажа в 30 мин.
- Не используйте в качестве опоры для прибора острые или режущие предметы.
- Любого массажа — в том числе ручного — следует избегать во время беременности и (или) при наличии одной или нескольких следующих жалоб в зоне массажа: свежие раны, тромботические заболевания, воспаления и опухоли любого происхождения, в том числе раковые. Если Вы проводите лечение каких-либо заболеваний, перед массажем рекомендуется проконсультироваться с врачом.
- Не используйте прибор во время поездки в автомобиле.
- При использовании электрических аппаратов, например кардиостимулятора, перед массажем в любом случае следует проконсультироваться с врачом.

Ввод в эксплуатацию

УДАЛЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ВИНТОВ

Осторожно отверните прилагаемым ключом-шестигранником винты на задней стенке массажера. Снимите защитный чехол и присоедините штекер к адаптеру. Внимание! Винты обратно не вставлять!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

Подключите адаптер к массажеру и вставьте штепсельную вилку в розетку. Включайте массажер только пультом дистанционного управления.

Комплектация и функции

В новой модели массажера Quattromed III Limited Edition обычные массажные головки из пластика заменены массажными головками из нефрита. Природные силы нефрита усиливаются с помощью интегрированного нагрева, массаж становится интенсивнее. Нагревание камня происходит медленно, лишь через несколько минут Вы почувствуете тепло.

В этой фазе нагревания вращающиеся движения массажных головок расслабляют ткани и устраняют поверхностные уплотнения и напряжения. Подключаемый вибромассаж обеспечивает дополнительную возможность стимулирования циркуляции крови и работы лимфатической системы. Кровоснабжение стабильно улучшается, облегчается процесс выведения шлаков из организма.

Для массажа поместите прибор Quattromed III Limited Edition на устойчивом стуле или кресле. Вес тела усиливает эффект массажа. Следите за тем, чтобы тело располагалось по центру, так чтобы массажные головки двигались параллельно позвоночнику. При роликовом массаже можно регулировать расстояние между массажными головками и позвоночником с помощью пульта дистанционного управления.

Через 15 минут массажер автоматически отключается. Чтобы продлить срок службы двигателей, включайте массажер повторно не ранее чем через 30 минут. Таким образом двигатели успевают остыть. Такая пауза полезна также для тела. Мы рекомендуем проводить сеансы массажа два, максимум три раза в день, чтобы также не подвергать мышцы большим нагрузкам.



В целях безопасности все наши приборы оснащены механизмом защиты от перегрева. При большой нагрузке и высоком давлении двигатели нагреваются. Прежде чем они станут источником опасности, происходит автоматическое отключение приборов, повторное включение возможно только через определенное время, от 30 до 40 минут.

Диагностика неисправностей

Неисправность

Прибор подключен к сети питания, при этом ни сам прибор, ни пульт управления не работают.

Устранение

- Проверьте подключение адаптера.
- Возможно, прибор перегрелся при слишком долгом использовании. Поэтому его следует отключить и позволить ему охладиться в течение 30 – 50 минут.

Специальные функции

Специальные функции



РАЗМИНАНИЕ

Кожа и мышцы разминаются либо между большим и указательным пальцами, либо между обеими руками. Эта техника массажа чаще всего применяется для снятия напряжения.



РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

РОЛЛИНГ – это приятное попеременное напряжение и расслабление мышц, он обладает особенным успокаивающим и расслабляющим действием. Эта техника часто применяется при завершении массажа для расслабления мышц и релаксации



УГЛЕРОДНО – ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ

Глубоко проникающее углеродно-инфракрасное тепло расширяет кровеносные сосуды, ток крови ускоряется, а мускульный тонус понижается. Кроме того, этот режим обладает крайне благоприятным воздействием на нервные клетки, которые ответственны за донесение импульсов боли до головного мозга.



ВИБРАЦИЯ

Вибрация вызывает равномерные колебания участков тела, проходящие вглубь. Стимулирует кровообращение в тканях.



РЕВЕРС

Функция реверса изменяет направление массажа массажных головок.



ПРОГРЕВАНИЕ НЕФРИТОМ

Нефрит относится к природным аккумуляторам и проводникам тепла. Он целенаправленно интегрирован в массажные головки, обеспечивает глубокое прогревание и действует расслабляюще.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Специально разработанные автоматические программы для всего тела, которые предусматривают широкий диапазон массажных техник. Кроме того, можно включить функцию прогрева, при желании.



АДАПТЕР ДЛЯ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ

Практичный автомобильный адаптер превращает Ваш массажный прибор в мобильного массажиста.



СВЕТИЛЬНИК-ПРОЖЕКТОР

Массажные ролики могут проводить массаж в конкретной точке тела.



ШИРИНА

Возможна регулировка расстояния между обеими массажными головками (узкое, среднее и широкое).

Дистанционное управление

[1] On/Off

При помощи этой кнопки можно включить или выключить прибор. При выключении массаж прекращается, а механизм автоматически переводится в положение покоя.

[2] Прогревание

Включение / выключение Глубоко проникающее углеродной и Нефрит тепла.

[3] Время (5-15 минут)

Предустановленное время массажа составляет 15 минут. При помощи этой кнопки Вы можете настроить нужное время массажа. (5-минутные интервалы / 5-10-15).

ВЫБРАТЬ ОБЛАСТЬ МАССАЖА

[4] Включение/выключение массажа по всей области спины.

[5] Включение/выключение массажа в области плеч и шеи.

[6] Включение/выключение массажа в области спины и поясницы.

[7] Vibration (в области сидения)

Начать/остановить вибрационный массаж.

[8] Kneading

При помощи этой кнопки можно включить или выключить функцию разминания.

[9] Reverse (только в режиме разминания)

При помощи этой кнопки можно задать направление вращения массажных головок.

[10] Rolling


При помощи этой кнопки можно включить или выключить функцию прокатывания.

[11] Width (только в режиме прокатывания)

При помощи этой кнопки во время массажа при помощи роликов можно изменить расстояние между массажными головками.

[12] Spot (возможно только в режиме разминания)

Путем удерживания кнопок в нажатом состоянии Вы можете перемещать массажные головки вперед и назад. При отпускании соответствующей кнопки механизм останавливается в нужном месте.

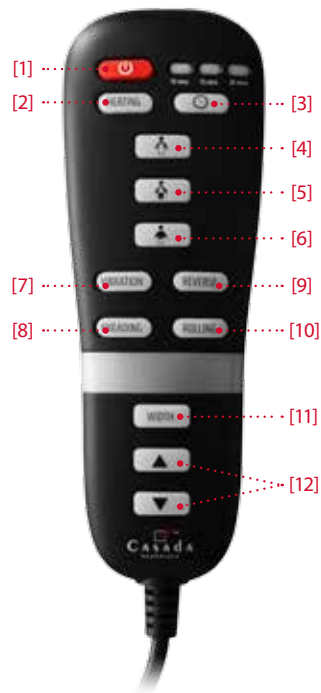

Технические характеристики

Размеры:	72 x 20 x 45 cm
Вес:	5,6 кг
Напряжение:	Вход: переменный ток 100–240 В ~ 50/60 Гц, 1600 мА Выход: постоянный ток 12 В, 5000 мА
Номинальная мощность:	60 Вт
Время работы в автоматическом режиме:	15 минут
Сертификаты:	



Хранение и уход

Регулярный уход продлит срок службы массажера Quadromed III и будет гарантией безопасности на протяжении всего времени эксплуатации.

1. Рекомендованные условия хранения: сухое место, без пыли.
2. Избегайте попадания жидкостей на массажер Quadromed III, держите прибор вдали от открытого огня.
3. Чистить прибор следует сухой, мягкой салфеткой.
4. Отключайте массажер Quadromed III от сети, если он не используется.

Декларация соответствия требованиям ЕС

Соответствует директиве 2006/95/ЕС.

Гарантийные условия

На изделие, описанное на обороте, продавец предоставляет гарантийный срок, предусмотренный законом. Срок гарантии начинается с даты покупки. Дата покупки подтверждается чеком. Продавец обязуется бесплатно отремонтировать или заменить продукты на территории Германии, в которых обнаружены дефекты. Гарантия не распространяется на быстро изнашивающиеся компоненты, такие как тканевые покрытия. Условием для гарантийного ремонта является отправка продавцу неисправного прибора вместе с чеком до истечения гарантийного срока.

Право на гарантийный ремонт теряет силу, если причиной обнаруженного дефекта является внешнее воздействие или последствия ремонта, а также изменений конструкции изделия, которые были произведены не изготовителем или его уполномоченным дистрибьютором.

Предоставленная продавцом гарантия ограничивается ремонтом или заменой изделия. В рамках данной гарантии производитель или продавец не берет на себя прочей ответственности, а также не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения инструкции по эксплуатации и (или) неправильного использования изделия.

Если в результате проверки изделия продавцом будет установлено, что гарантийное требование касается дефекта, на который гарантия не распространяется, или гарантийный срок уже истек, расходы по проверке и ремонту оплачивает покупатель.



«Касада Интернэшнл ГмбХ»
Обермайерс Фельд, 3
33104 Падерборн, Германия
info@casada.com
www.casada.com

Авторское право на изображение и текст принадлежит компании «КАСАДА Интернэшнл ГмбХ», и их использование возможно только с явного согласия правообладателя.
Авторское право © 2016 г. «КАСАДА Интернэшнл ГмбХ».
Все права защищены.

