

Уход за изделием:

- стирать при температуре не более 40°C;
- ручная стирка;
- сушить на горизонтальной поверхности;
- не использовать отбеливатель;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- не гладить утюгом;
- не выкручивать;
- **запрещена эксплуатация влажного изделия.**

Гарантийные обязательства:

- гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи;
- срок службы не менее 1 года.

Комплект поставки:

Манжета фиксирующая1* шт.
Руководство по эксплуатации1 шт.
Потребительская тара1 шт.

* Манжета поставляется в разобранном виде

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

ООО «ВИТАФОН» 198097, Россия,
г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, 23

Телефоны для справок:

8 800 100-19-45 (звонок по России бесплатный)

Сайты в интернете:

www.vitafon.ru, www.vitafon-market.ru, www.vsegdazdorov.ru

Адрес электронной почты: info@vitafon.ru

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ "ПЛЕЧЕВАЯ"

ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ

«ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «ВИТАФОН»

www.vitafon.ru,

www.vitafon-market.ru



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Манжета фиксирующая "Плечевая" изготовлена в соответствии с действующей технической документацией (ТО 8157-002-33159359) и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ

"ПЛЕЧЕВАЯ"

ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манжета предназначена для индивидуального использования и применяется для фиксации виброфонов аппаратов серии «Витафон» на плече. Манжета надевается на тело под одежду или поверх одежды из тонких тканей.

Манжета плечевая состоит из:

- 4-х карманов для виброфонов, зафиксированных на ремне (поз. 1 на рис. 1 и 2);
- длинного эластичного ремня (поз. 2 на рис. 1 и 2) для фиксации через грудь;
- малого ремня с ремешком (поз. 3 на рис. 1 и 2), фиксирующих положение манжеты на руке и препятствующих сползанию манжеты с плеча.



Рис.1 Внешний вид манжеты

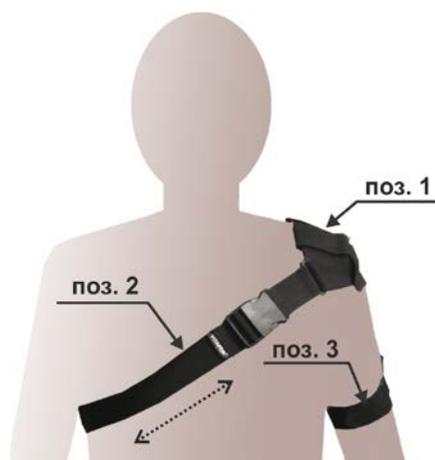


Рис. 2 Фиксация манжеты на груди

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установите 2 или 4 виброфона в карманы. Мембраны виброфонов должны прилегать к голубой ткани (рис. 3);
2. Пристегните ремень (поз. 2) к ремню (поз.1) и наденьте манжету на плечо голубой тканью к телу, так чтобы пластмассовая пряжка оказалась со стороны груди;
3. Отрегулируйте и застегните второй конец эластичного ремня со стороны груди, как показано на рис. 2;
4. Один конец ремешка (поз. 4, рис. 4) закрепите между карманами с виброфонами (рис. 4). Наденьте малый ремень (поз. 3, рис. 4) на руку ближе к локтевому суставу. Отрегулируйте положение малого ремня так, чтобы карманы с виброфонами не сползли с плеча при движении руки, и зафиксируйте второй конец ремешка на малом ремне.
5. Убедитесь в комфортности надетой манжеты и плотности прижатия виброфонов.

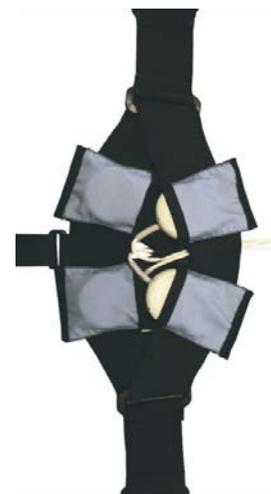


Рис. 3 Установка виброфонов

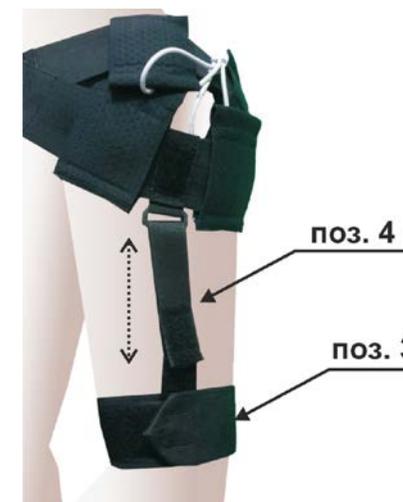


Рис. 4 Регулировка малого ремня