

КОМПЛЕКТ МАНЖЕТ ФИКСИРУЮЩИХ ДЛЯ НОГ

для аппаратов серии «Витафон» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект манжет для ног предназначен для индивидуального использования и применяется для фиксации виброфонов аппаратов серии «Витафон» на нижних конечностях в области голени или бедра. Манжеты надеваются непосредственно на тело под одежду.

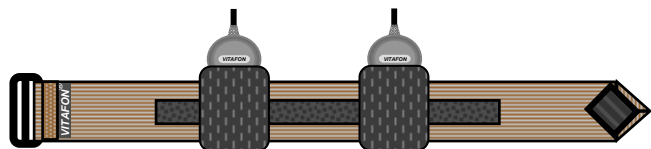


Рис.1

Манжета для ног состоит из ремня длиной 540 мм с надетыми на него двумя кармашками для виброфонов (рис.1). В комплект входит две манжеты для ног. Длину ремня манжеты можно отрегулировать с помощью пряжки и липучки. Кармашки легко перемещаются вдоль ремня.

Для получения необходимых размеров можно соединять манжеты друг с другом (рис.2).

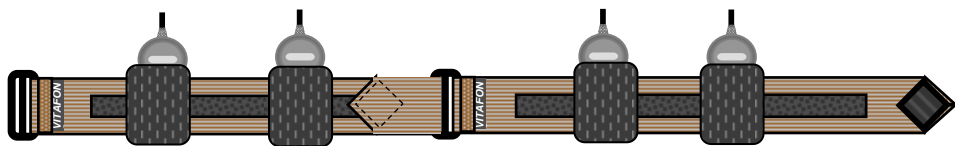


Рис. 2

Для использования манжет следует:

1. Вложить виброфоны в кармашки манжеты, так чтобы мембрана виброфона прилегала к тонкой смесовой ткани.
2. Зафиксировать манжету на теле так, чтобы виброфоны оказались над выбранными областями. В некоторых случаях (в зависимости от обхвата голени или бедра) конец ремня необходимо продеть под резинку, на которой держится кармашек.



Рис. 3. Пример фиксации виброфонов на мышцах голени обеих ног. Кармашки с виброфонами располагают на передней и задней мышцах голени.

Комплект поставки:

Манжета для ног.....	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара с вкладышем	1 шт.

Уход за изделием:

- стирать при температуре не более 40°C;
- ручная стирка;
- сушить на горизонтальной поверхности;
- не использовать отбеливатель;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- не гладить утюгом;
- не выкручивать;
- **запрещена эксплуатация влажного изделия.**

Гарантийные обязательства:

- гарантийный срок использования 6 месяцев со дня продажи;
- срок службы не менее 1 года.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

**ООО «ВИТАФОН» 198097, Россия,
г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, 23**

Телефоны для справок:

8 800 100-19-45 (звонок по России бесплатный)

Сайты в интернете:

www.vitafon.ru, www.vitafon-market.ru , www.vsegdazdorov.ru

Адрес электронной почты: info@vitafon.ru

КОМПЛЕКТ МАНЖЕТ ДЛЯ НОГ

ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ


«ВИТАФОН»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «ВИТАФОН»

www.vitafon.ru,

www.vitafon-market.ru

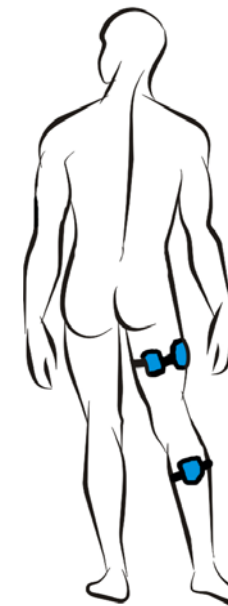

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплект манжет фиксирующих для ног изготовлен в соответствии с действующей технической документацией (ТО 8157-002-33159359) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК